



ハイドロマーク

HydroMARK™

乳房用病変識別マーカー

ハイドロマークはハイドロゲル製プラグと
チタン製マーカーの組み合わせにより
X線、超音波、MRI下で高い視認性を実現します。



ハイドロマーク留置の メリット

超音波下での
優れた視認性

症例に合わせた
マーカーの
バリエーション



手術時、治療時、
経過観察時の目印

視認性

超音波下で高い視認性を有するハイドロゲルを採用

ハイドロゲル製プラグは体内留置後、膨潤し超音波下で低超音波画像として描出され、時間の経過と共に体内に吸収されます。


超音波画像

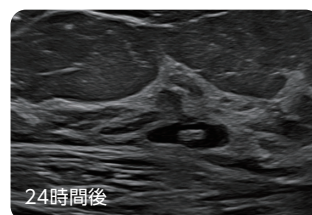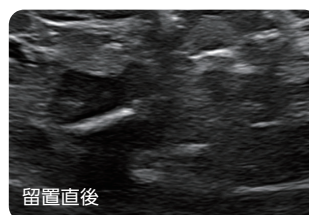


X線およびMR画像下でも視認が可能

マーカーは純チタン製、生体適合性に優れています。

X線画像

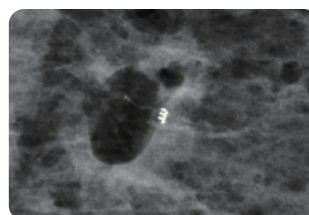

MR画像

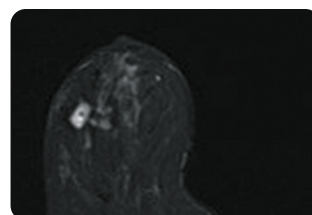

*それぞれの画像の倍率は異なります。画像は本品の見え方の一例であり、臨床における視認性と比較する目的ではありません。

Mammotome

バリエーションのある マーカー形状


臨床的ニーズに応じて
3タイプからお選びいただけます。



バレル



オープンコイル

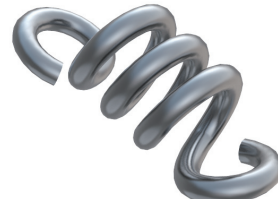

バタフライ

マンモトーム生検機器別の形状


マンモトーム リボルブ用 (ハイドロマーク・リジッド)



マンモトーム エリート用 (ハイドロマーク・リジッド／シャープ)



マンモトーム用 (ハイドロマーク・フレキシブル)

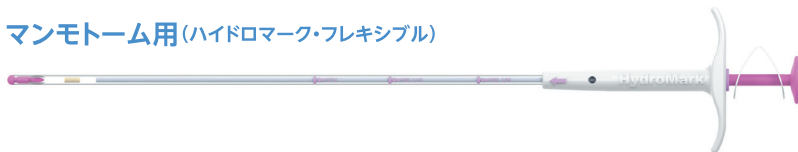

*製品の実際の寸法/寸法比ではありません。

併用可能機器リスト

併用可能機器 (対応モダリティ)	販売名 (認証番号)	製品コード	マーカー形状	包装単位
マンモトーム リボルブ 10G (ST/US)	マンモトーム リボルブ (226AABZX00092000)	4010-03-09-T1	バレル 	10入
	マンモトーム リボルブ US (226AABZX00187000)	4010-03-09-T3	オープンコイル 	10入
マンモトーム 8G (ST/US/MR)	ハンディーマンモトーム プローブ (21300BZY00186000)	4010-01-08-T1	バレル 	10入
	マンモトーム EX (224AABZX00113000)	4010-01-08-T3	オープンコイル 	10入
	マンモトーム MRシステム (225AABZX00111000)	4010-01-08-T4	バタフライ 	10入
マンモトーム 11G (ST/US)	ハンディーマンモトーム プローブ (21300BZY00186000)	4010-01-11-T1	バレル 	10入
	マンモトーム EX (224AABZX00113000)	4010-01-11-T3	オープンコイル 	10入
		4010-01-11-T4	バタフライ 	10入
マンモトーム エリート 10G/13G (US)	マンモトーム エリート (225AABZX00037000)	4010-02-15-T1	バレル 	10入
		4010-02-15-T3	オープンコイル 	10入
		4010-02-15-T4	バタフライ 	10入

●事前に必ず本製品の使用目的、禁忌・禁止・警告並びに使用上の注意を添付文書*でご確認頂き、使用方法を順守してください。

*独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) のホームページでも閲覧可能です。

●製品は改良等のため予告なく形状・仕様が変更する事があります旨、あらかじめご了承ください。

製造販売元／お問い合わせ先

デヴィコア メディカル ジャパン株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目29番9号 東亜DKK株式会社別館オフィスビル7階
TEL:03-6205-6951 FAX:03-6205-6952 www.devicomedicaljapan.jp

クラス分類:[4] 高度管理医療機器
一般的名称: 挿込み型病変識別マーカー
承認番号: 22900BZX00070000

DMJ017B